





GUÍA RÁPIDA TLG-20 TOP Corporation





Modo Funcionamiento TLG-20 TOP Corporation



Pantalla inicial

- Pulsar el botón del tipo de cánulas que vamos a utilizar
 - SC Type → Con control de T^a
 - Lesión térmica
 - XE-PRF → Sin control de T^a
 - Lesión Pulsada



Modo Funcionamiento TLG-20 TOP Corporation




El sistema reconoce el número de cables conectados.

Podemos elegir monopolar, bipolar, tripolar y tetrapolar en función del número de cables conectados.



Modo Funcionamiento TLG-20 TOP Corporation

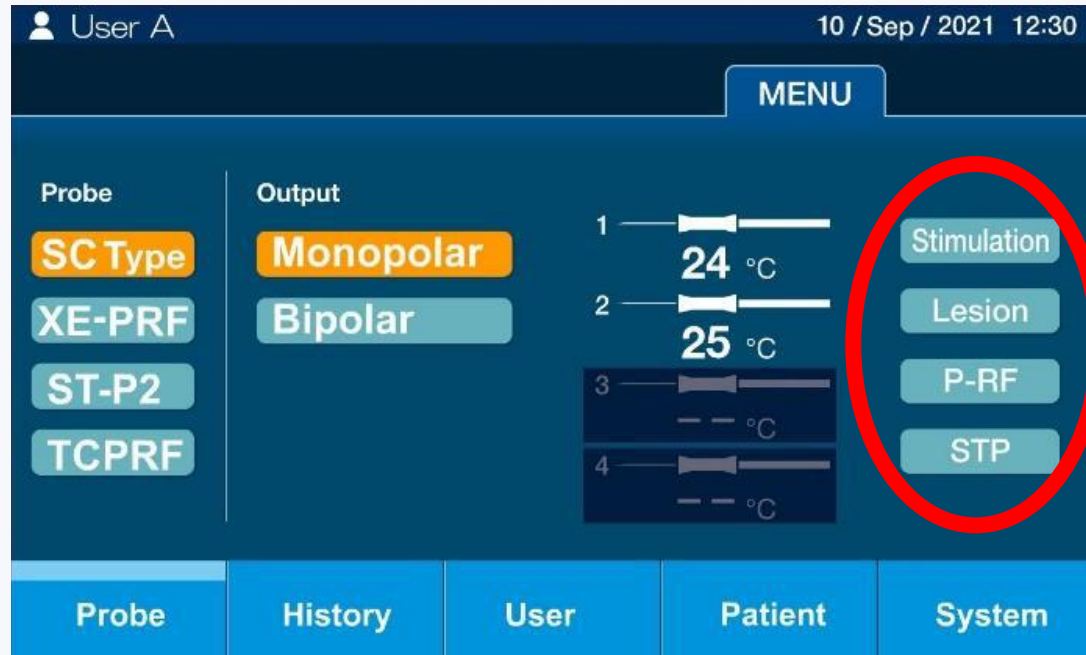

En la parte derecha de la pantalla tenemos los diferentes procedimientos:

- Stimulation
- Lesion (térmica)
- P-RF (Pulsada)
- STP



Modo Funcionamiento TLG-20 TOP Corporation



• Pantalla de espera de Stimulation (Estimulación)

- (1) Pestaña Stimulation (Estimulación)
- (2) Pestaña Sensory (Sensorial)
- (3) Pestaña Motor
- (4) Botón de configuración de Frequency (Frecuencia)
- (5) Botón de configuración de Width (Ancho) de pulso
- (6) Botón de configuración del Range (Rango) de emisión



Modo Funcionamiento TLG-20 TOP Corporation

Pantalla inicial

- **Pantalla de espera de Lesion (múltiples sondas, tipo SC) para lesión térmica**



- (1) Pestaña Lesion (Lesión)
- (2) Área de visualización del valor configurado



Modo Funcionamiento TLG-20 TOP Corporation

Pantalla inicial



- **Pantalla de espera de PRF (múltiples sondas, tipo XE-PRF) para radiofrecuencia pulsada**



- (1) Pestaña P-RF (Pulsada)
- (2) Área de visualización del valor configurado



Modo Funcionamiento TLG-20 TOP Corporation

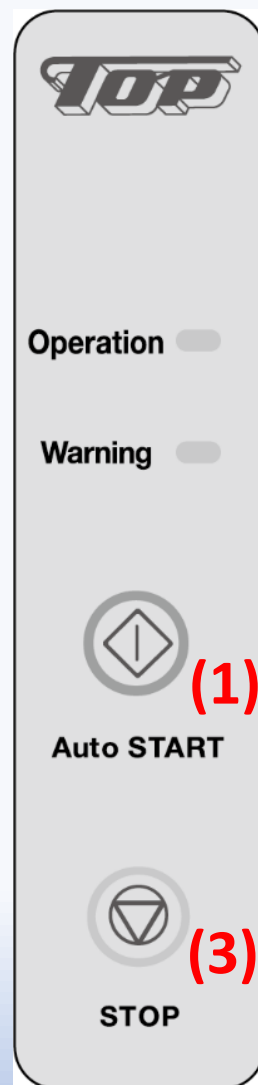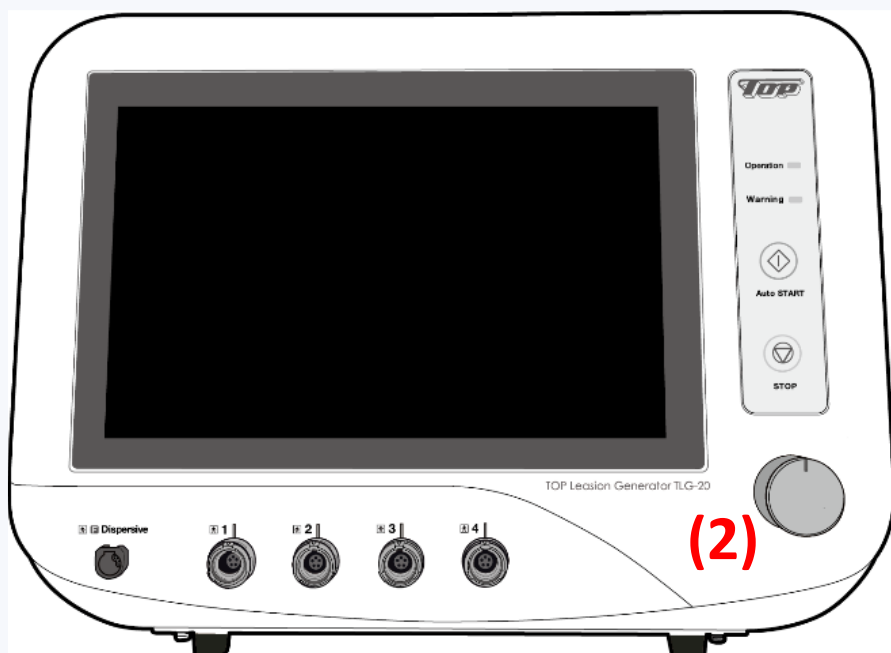

- Para los procesos de estimulación sensitiva y motora, pulsar Auto START (1) y giramos la rueda (2) a las intensidades necesarias.
- Para la lesión térmica o pulsada pulsar Auto START (1) y el sistema automáticamente se pone en funcionamiento.
- Al terminar cualquier procedimiento tanto de estimulación como de lesión pulsar STOP (3)

